

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ

Тележка-каталка ТНС-01ММ

Автоматическая расфиксация шасси: как она устроена, при каких условиях не срабатывает и что проверяется перед тем, как поставить каталку на землю. Правила изготовителя и информационное письмо Росздравнадзора

С разбором случая складывания шасси под пациентом при въезде в приёмное отделение.

Причина — ремни безопасности, пропущенные так, что они связали переднее и заднее шасси и заблокировали кинематику автоматической расфиксации.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · CC BY-NC-SA 4.0

Случай

Слово бригаде

«Да уж, это был действительно epic fail: ножки нашей многострадальной каталки сложились прямо во время въезда на скорости в шоковый зал. Представьте себе: монитор пикает, пациентка задыхается, кислород шипит, три человека, включая водителя, толкают носилки и... баа-бааах! Сначала складывается передняя ножка, потом задняя. Фельдшера хватаются за раму и путем травмирования собственных запястий смягчают падение, но не сильно. Эпично, да, действительно. А причина, по которой передняя стойка не вышла, как потом выяснилось, была еще эпичнее — кто-то (не будем показывать пальцем, хорошо?) так умудрился просунуть ремни безопасности, что прификсировал ими обе стойки. Как? Ну, очумелые ручки...»

Идентификация изделия

Описанная конструкция — тележка-каталка **ТНС-01ММ**, входящая в состав медицинского изделия «Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП-ММ» по ТУ 9451-009-10660186-2006, регистрационное удостоверение № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010, изготовитель — ООО «НПП «Микромонтаж», Нижний Новгород.

Состав комплекта: тележка-каталка ТНС-01ММ, носилки мягкие НМ-ММ, носилки кресельные НК-ММ, носилки ковшовые НКРЖ-ММ, носилки плащевые НП-ММ, носилки продольно складные НПС-ММ, носилки продольно и поперечно складные НППС-ММ, устройство приёмное УП-ММ.

Существенное для дальнейшего обстоятельство: по описанию изготовителя автоматическая расфиксация шасси при загрузке и выгрузке **обеспечивается только совместно с приёмным устройством УП-ММ из состава того же комплекта**. Там же указано наличие системы страховки от падения при выгрузке, также работающей только в паре с УП-ММ. Автоматика является свойством не тележки самой по себе, а пары «тележка — приёмное устройство».


Ремни безопасности конструктивно относятся к носилкам, а не к тележке: у носилок НМ-ММ модели 0602 это три регулируемых двухточечных ремня с замком.

Грузоподъёмность комплекта — 165 кг.

Терминология, используемая ниже, задана ГОСТ Р 56330-2016: **тележка-каталка** — изделие для транспортировки пациента с устройством фиксации съёмных носилок на шасси колёсных опор и механизмом управления складыванием; **шасси** — складные или нескладные опоры тележки-каталки с колёсами; **устройство приёмное** — изделие для приёма, размещения, фиксации и перемещения носилок и тележек-каталок в салоне транспортного средства.

Устройство тележки-каталки

Конструкция состоит из несущей рамы с продольной направляющей балкой, на которой подвижно закреплены переднее и заднее складные шасси с колёсными опорами.

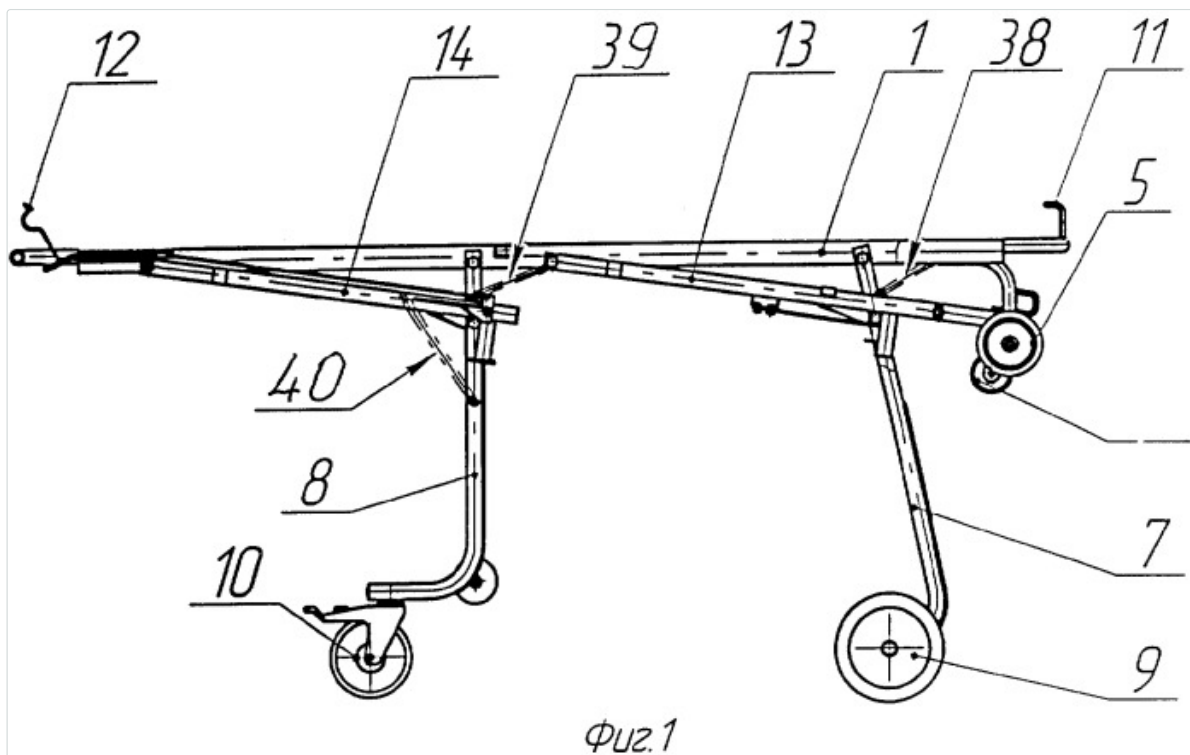

Тележка-каталка в рабочем положении. Обозначения: 1 — несущая рама; 5 — первая пара опорных колёс несущей рамы (головная часть); 7 — переднее шасси; 8 — заднее шасси; 9 — вторая пара опорных колёс (переднего шасси); 10 — третья пара опорных колёс (заднего шасси); 11 и 12 — задняя и передняя ручки устройства ручной расфиксации; 13 — переднее фиксирующее устройство; 14 — заднее фиксирующее устройство; 38, 39, 40 — пружины растяжения. Головная часть — справа. Чертёж из описания изобретения к патенту RU 2321383 С1, патентообладатель ООО НПП «Микромонтаж».

Три пары колёсных опор на подшипниковых узлах с антистатическими шинами различаются по назначению:

Колёсная пара	Расположение	Назначение
Первая (5)	головная часть несущей рамы	первичная опора и элемент качения при погрузке тележки в санитарный автомобиль; однонаправленные колёса Ø 200 мм
Вторая (9)	переднее шасси	опора в рабочем положении; колёса Ø 150 мм
Третья (10)	заднее шасси	опора в рабочем положении, самоориентирующиеся колёса с тормозом


В головной и ножной частях рамы расположены ручки управления с фиксаторами положений, которыми регулируются высота панели и её наклоны в ручном режиме — при перекладывании пациента и оказании помощи. При такой регулировке шасси раскладываются в разные стороны. В торцевых частях рамы находятся передний жёсткий и задний пружинный упоры для продольной фиксации носилок. В салоне автомобиля тележка-каталка фиксируется в приёмном устройстве.

Как работает автоматическая расфиксация

Механизм описан в патенте RU 2321383 С1, принадлежащем изготовителю. Понимание его устройства объясняет, почему посторонний предмет в кинематике приводит к отказу.

Каждое шасси удерживается в рабочем положении собственным фиксирующим устройством — вилообразным кронштейном-укосиной с П-образной частью, шарнирно связанной с рамой, и штангой, на которой закреплён ложемент. Фиксация происходит

за счёт захвата **стопорной перемычки**, неподвижно закреплённой в верхней части шасси, **зубом-зацепом** ложементы.

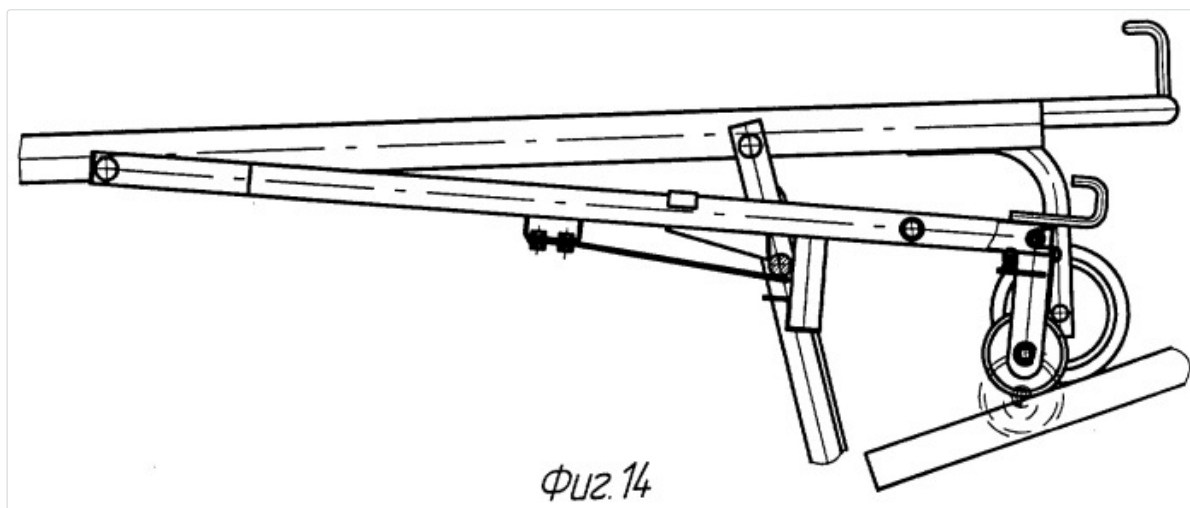

Момент, с которого начинается автоматическая расфиксация при загрузке: качающееся колесо-копир переднего фиксирующего устройства набегаёт на приёмный лоток устройства приёмного (наклонная планка справа внизу). Чертёж из описания изобретения к патенту RU 2321383 C1.

Последовательность при загрузке в автомобиль. Колесо-копир переднего фиксирующего устройства набегаёт на приёмный лоток; штанга поднимается, зуб-зацеп выходит из зацепления со стопорной перемычкой, и переднее шасси расфиксируется и складывается назад. При дальнейшем продвижении тележки ось второй колёсной пары — то есть колёс уже сложившегося переднего шасси — нажимает на жёсткую стойку второго ложементы, поднимает штангу заднего фиксирующего устройства и расфиксирует заднее шасси, которое складывается следом.

Из этой схемы следует, что **заднее шасси расфиксируется не приёмным устройством, а сложившимся передним шасси**. Переднее шасси в этой кинематике служит исполнительным звеном для заднего, и очерёдность здесь не условна: она встроена в конструкцию.

Последовательность при выгрузке обратная. Сначала расфиксируется заднее шасси: оно отбрасывается вниз под собственным весом и действием пружины, доходит до вертикального рабочего положения и захватывается задним фиксирующим устройством. Затем раскладывается и фиксируется переднее шасси.

Заявленной целью конструкции, прямо сформулированной в патенте, было «свести к минимуму риск непредвиденных самопроизвольных сложений шасси с пациентом» и обеспечить управление шасси независимо от оператора. Автоматика, таким образом, задумана как замена человеческому контролю — и при её отказе никакого дублирующего механизма, кроме визуальной проверки, не остаётся.

Правила эксплуатации изготовителя

22 сентября 2015 года Росздравнадзор письмом № 01и-1542/15 дошёл до субъектов обращения медицинских изделий правила эксплуатации этого комплекта, приложив информационное письмо изготовителя № 293 от 15.09.2015. В письме Росздравнадзора указано, что оно подготовлено «на основании поступивших сведений», и что нарушение правил «создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан». Ниже приведены пункты письма изготовителя, относящиеся к разбираемому отказу.

Пункт	Содержание
2	К работе с тележкой допускается только специально обученный персонал; необходимо не менее двух обученных операторов . Неумелые действия неподготовленных людей могут привести к травмам и повреждениям
3	Перед началом смены ответственный за эксплуатацию проводит тщательный осмотр тележки и проверку работоспособности механизмов
4	Не реже раза в три месяца — очистка и обработка подшипниковых узлов, осей колёсных опор, направляющих и фиксаторов силиконовыми смазками
5	При транспортировке пациента: проверить фиксацию носилок на тележке; зафиксировать пациента на носилках ремнями безопасности; зафиксировать боковые ограждения в верхнем положении
6	Для погрузки на приёмное устройство тележка ручками управления устанавливается в крайнее верхнее положение
7	« ВНИМАНИЕ! Расфиксация шасси при загрузке и выгрузке тележки из автомобиля осуществляется автоматически » — без ручного управления механизмом расфиксации. Погрузка, выгрузка и транспортировка вне автомобиля тележки с пациентом выполняется как минимум двумя операторами : один со стороны ножной секции, второй поддерживает раму головной секции, контролирует точность совмещения колёс рамы с приёмным устройством и обеспечивает безопасность
8	При выгрузке для свободного раскладывания и четкой фиксации переднего шасси зазор между колесом и грунтом должен быть не менее 50 мм. «ВНИМАНИЕ! Переднее шасси должно быть разложено и фиксировано до установки на грунт. Проверить надёжность фиксации и устойчивость тележки на дорожном покрытии!»
9	Не оставлять тележку на незаторможенных колёсах

Требование о зазоре не менее 50 мм независимо закреплено и в ГОСТ Р 56330-2016: совместимость компонентов комплекта определяется в том числе высотой панели приёмного устройства, обеспечивающей беспрепятственное раскладывание шасси тележки-каталки до его полной фиксации при гарантированном зазоре между колесом и грунтом не менее 50 мм.

Условия, при которых автоматика не срабатывает

Условие	Следствие	Источник
Погрузка не в строго горизонтальном положении	нарушается порядок расфиксации шасси	руководство по эксплуатации
Поднятая ножная часть	нарушается работа автоматики, складывание заднего шасси запрещается	руководство по эксплуатации
Тележка не выведена в крайнее верхнее положение перед погрузкой	колёса рамы не совмещаются с приёмным устройством, колесо-копир не набегает на лоток	письмо изготовителя, п. 6
Зазор между колесом и грунтом при выгрузке менее 50 мм	переднее шасси не успевает свободно разложиться и четко фиксироваться	письмо изготовителя п. 8; ГОСТ Р 56330-2016
Приёмное устройство не из состава комплекта	автоматическая расфиксация и система страховки от падения не обеспечиваются	описание изготовителя

Условие	Следствие	Источник
Загрязнение и отсутствие смазки направляющих и фиксаторов	затруднённый ход штанг и зубьев-зацепов	письмо изготовителя, п. 4
Посторонний предмет в кинематике шасси или фиксирующих устройств	шасси не доходит до рабочего положения либо стопорная перемычка не захватывается зубом-зацепом	разбираемый случай

Разбор случая

Механизм отказа. Ремни безопасности носилок были пропущены так, что связали переднее и заднее шасси между собой. Для кинематики это означает, что шасси перестали быть двумя независимыми звеньями: переднее шасси не могло свободно опуститься в вертикальное рабочее положение и подвести стопорную перемычку под зуб-зацеп переднего фиксирующего устройства. Соответственно при выгрузке оно либо не разложилось вовсе, либо разложилось не полностью и не зафиксировалось.

Почему падение произошло не сразу, а при разгоне. Незафиксированное шасси, находящееся близко к вертикали, способно нести вертикальную нагрузку: зуб-зацеп не удерживает его, но геометрия и трение позволяют опоре какое-то время стоять. Разрушает это равновесие горизонтальная составляющая — толчок при разгоне, порог, поворот. Поэтому каталка прошла от автомобиля до приёмного отделения и сложилась при въезде, а не в момент выгрузки.

Почему следом сложилось заднее шасси. Ремень связывал оба шасси, поэтому складывание переднего передалось на заднее механически. Дополнительно заднее фиксирующее устройство по конструкции взаимодействует с осью колёсной пары переднего шасси: движение переднего шасси штатно служит сигналом для расфиксации заднего. Последовательность «сначала передняя ножка, потом задняя», описанная бригадой, воспроизводит проектную очередность механизма — с той разницей, что происходило это не на приёмном лотке, а на полу приёмного отделения.

Где отказ был бы обнаружен. Пункт 8 письма изготовителя требует, чтобы переднее шасси было разложено и фиксировано **до установки на грунт**, и отдельно — проверить надёжность фиксации и устойчивость тележки. Эта проверка выполняется в момент, когда тележка ещё частично опирается на приёмное устройство и удерживается двумя операторами, то есть падение с пациентом в этот момент исключено. Проверка занимает секунды и является единственным звеном, которое отделяет заблокированную автоматику от падения.

Роль числа операторов. Пункты 2 и 7 требуют не менее двух обученных операторов, причём второй, поддерживая раму головной секции, обеспечивает безопасность. В описанном эпизоде каталку толкали три человека, включая водителя, — то есть людей было достаточно; распределение задач, при котором кто-то отвечает за состояние шасси, а не только за толкание, письмом не обеспечивается автоматически.

Данные, оставшиеся невыясненными. Из описания не следует, на каком этапе ремни оказались пропущены через шасси и проходила ли каталка осмотр перед сменой, предусмотренный пунктом 3. Не установлено также, была ли ранее нарушена смазка направляющих и фиксаторов: затруднённый ход зуба-зацепа снижает порог, при котором постороннее препятствие приводит к отказу фиксации.

Проверка перед установкой на грунт

Порядок следует из пунктов 6–8 письма изготовителя и из описанного механизма отказа.

Этап	Что оценивается
До погрузки в автомобиль	ремни безопасности заведены только через раму носилок и тело пациента; свободный ход обоих шасси; тележка выведена в крайнее верхнее положение; положение строго горизонтальное, ножная часть не поднята
При выгрузке	зазор между колёсами и грунтом не менее 50 мм до момента раскладывания; тележка удерживается двумя операторами
До установки на грунт	переднее шасси разложено полностью и фиксировано; заднее шасси разложено полностью и фиксировано; фиксация проверена нагрузкой на раму при сохранении опоры на приёмное устройство
После установки на грунт	устойчивость на дорожном покрытии; отсутствие люфта и перекоса; при остановке — колёса заторможены

Признак, на который опирается проверка: разложенное и зафиксированное шасси не имеет свободного хода назад при покачивании рамы вдоль продольной оси. Шасси, дошедшее до вертикали, но не захваченное зубом-зацепом, при таком покачивании подаётся.

Заправка ремней безопасности

Ремни безопасности принадлежат носилкам и предназначены для фиксации пациента на панели носилок: у носилок НМ-ММ это три двухточечных ремня с замком. Штатный путь ремня — через раму носилок и поверх пациента; шасси тележки-каталки, фиксирующие устройства, штанги, ложементы и колёсные оси в трассе ремня не участвуют.

Практическое следствие: ремень, заведённый ниже плоскости панели носилок, потенциально попадает в зону хода шасси. Проверить это можно вне вызова — при переводе каталки из транспортного положения в рабочее и обратно ремни не должны натягиваться, менять положение и препятствовать ходу шасси. Если при складывании шасси ремень натягивается, его трасса проложена неверно.

Отдельно стоит отметить, что письмо изготовителя требует фиксировать пациента ремнями (пункт 5.2), но не описывает трассу ремня и не предупреждает о её влиянии на работу шасси. Разбираемый случай показывает, что такое предупреждение в эксплуатационной документации было бы уместно.

И конечно же надо помнить, что пациент во время транспортировки **ВСЕГДА** должен быть фиксирован ремнями безопасности!



Дополнительные материалы

Приёмы перемещения пациента, распределение нагрузки между членами бригады и работа с каталкой в лестничных клетках текстом передаются плохо. По этой части полезен разбор «Каталки, носилки и другие способы транспортировки пациентов» на канале «Про СМП» (Дмитрий и Алексей): там рассматриваются мягкие носилки, спинальный щит и сидячие носилки в сравнении, приёмы переноски и отдельно — каталки производства «Микромонтаж». Видео: https://vkvideo.ru/video-204571055_456239605; канал целиком — <https://rutube.ru/channel/23667661/>.

Видео представляет позицию авторов и по их собственной оговорке не заменяет действующие распоряжения, приказы и протоколы. Правила эксплуатации изделия задаются документами, перечисленными ниже.

Источники

- Информационное письмо ООО «НПП «Микромонтаж» № 293 от 15.09.2015 по эксплуатации медицинского изделия «Комплект средств перемещения и перевозки пациентов КСПП-ММ» по ТУ 9451-009-10660186-2006, РУ № ФСР 2010/09084 от 01.11.2010; подписано директором Л. Н. Кузьминым — правила эксплуатации, пункты 1–9.
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения № 01и-1542/15 от 22.09.2015 «О правилах эксплуатации медицинского изделия», подписано руководителем М. А. Мурашко — доведение правил изготовителя до субъектов обращения медицинских изделий.
- Патент RU 2321383 C1 «Тележка-каталка под съёмные носилки для санитарного транспортного средства», патентообладатель ООО НПП «Микромонтаж», авторы В. А. Попов, Т. Н. Шхиян, Ю. П. Иванов, С. А. Береснев, Л. Н. Кузьмин — устройство фиксирующих механизмов, последовательность автоматической расфиксации при загрузке и выгрузке, заявленные задачи конструкции.
- ГОСТ Р 56330-2016 «Изделия медицинские. Технические средства размещения и перемещения больных и пострадавших на догоспитальном этапе. Общие технические требования и методы испытаний» — определения тележки-каталки, шасси и устройства приёмного; требования к механизму автоматического складывания; требование к зазору между колесом и грунтом не менее 50 мм.
- Руководство по эксплуатации на комплект средств перемещения и перевозки — устройство комплекта, нумерация узлов, требования к горизонтальному положению при погрузке и указание о влиянии подъёма ножной части на работу автоматики.
- Описание изделия изготовителя — состав комплекта, характеристики носилок НМ-ММ, условие работы автоматической расфиксации только совместно с приёмным устройством УП-ММ, грузоподъёмность.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник
fig01_obshchiy_vid.jpg	Тележка-каталка в рабочем положении, нумерация узлов	Фиг. 1 описания изобретения к патенту RU 2321383 C1, патентообладатель ООО НПП «Микромонтаж»
fig14_kontakt_s_lotkom.jpg	Контакт колеса-копира с приёмным лотком	Фиг. 14 того же описания изобретения

Файл	Что изображено	Источник
fiksirovanny_kot.jpeg	Забинтованный кот	Интернет-мем; происхождение и условия использования не установлены. Изображение приведено без изменений, включая впечатанную подпись и водяной знак сервиса, на котором оно собрано

Чертежи воспроизведены из официальной публикации описания изобретения в информационных целях, с указанием патента и патентообладателя.

Выходные данные

Материал: «Тележка-каталка THC-01MM», инструкция и разбор отказа. Версия 1.0.

Серия: «Крещение поворотом» — материалы по оборудованию и оснащению.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно; продавать — нельзя.

Оговорка. Материал носит учебный характер. Он не заменяет руководство по эксплуатации изделия, информационные письма изготовителя и распоряжения службы. Перед работой с изделием следует пользоваться действующей эксплуатационной документацией на конкретную модель: модификации THC-01MM различаются числом уровней регулировки и составом носилок, а состав комплекта и конструкция приёмного устройства влияют на работу автоматики.

О клинических случаях. Случай приведён обезличенно: без имён, даты вызова, адреса, номера карты вызова, названий стационара и подразделения.

Нашли ошибку? Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.